




REHABILITACIÓ FUNCIONAL

Pujaescales de seient

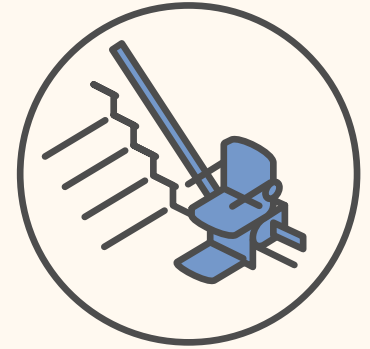

DESCRIPCIÓ:

Seient que es desplaça per un carril guia fixat al lateral de l'escala. Té un motor elèctric que s'acciona mitjançant una botonera de pressió contínua situada al mateix seient i a la paret. El seient i el reposapeus es pleguen quan no s'utilitzen per ocupar el mínim espai.



FUNCIÓ:

Permet pujar i baixar trams d'escaleres de qualsevol longitud a una persona asseguda al seient.



INDICACIONS:

Persones amb problemes de mobilitat que els dificulta o impedeix pujar o baixar escaleres.



OBSERVACIONS:

Per facilitar l'accés, el seient gira 90° i es bloqueja. No és un bon sistema per a persones que van en cadira de rodes, ja que l'aparell puja i baixa la persona, però no la cadira. La normativa no accepta aquest sistema com a solució per fer accessible un edifici.

Anotacions:
